

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES DE USO.

PASO 1. Asegúrese de que la zona está limpia y seca. Aspirar el introductor, a continuación retirar el introductor 2-3 cm.

PASO 2. Retirar la protección del adhesivo del SafeGuard Radial aproximadamente hasta la mitad (ambos extremos) y aplicar el centro del balón (globo) sobre la zona de la arteriotomía. Las flechas deben señalar hacia la parte superior del brazo del paciente.







PASO 3. Retirar el resto del recubrimiento del adhesivo y fijar el apósito alrededor de la muñeca.

PASO 4. Acoplar firmemente la jeringa con conexión Luer lock al tubo marcado con la palabra "AIR". **Confirmar que solo se está inyectando aire en el dispositivo.** Inflar el balón con un máximo de 7 mL de aire. Retirar la jeringa.


PASO 5. Retirar el introductor. Confirmar que no hay sangrado. **Confirmar el pulso**

distal y proximal. Asegúrese de que se mantiene una perfusión adecuada. En caso necesario, ajustar el volumen de aire del balón hasta que el pulso distal y el proximal sean adecuados. El volumen de aire no debe superar los 7 mL.

NOTA: El volumen de aire y el tiempo de compresión necesarios pueden variar según el estado del paciente, la dosis de anticoagulante y el tamaño del lugar de la punción.

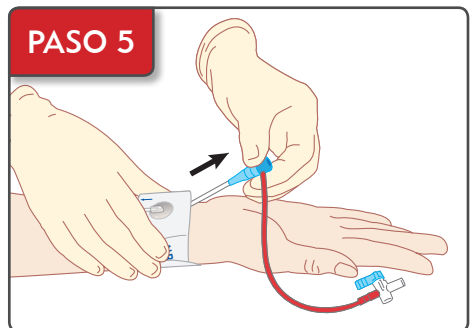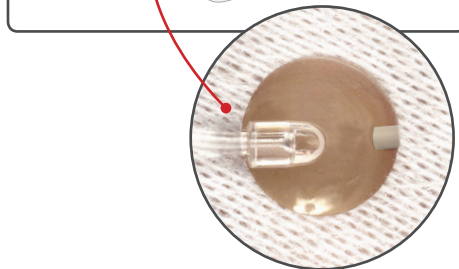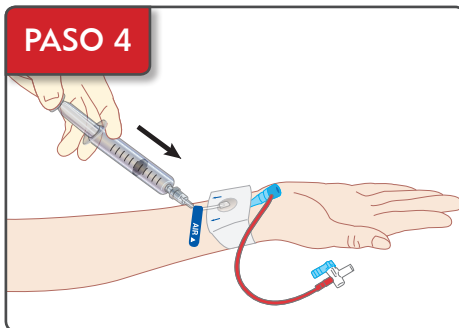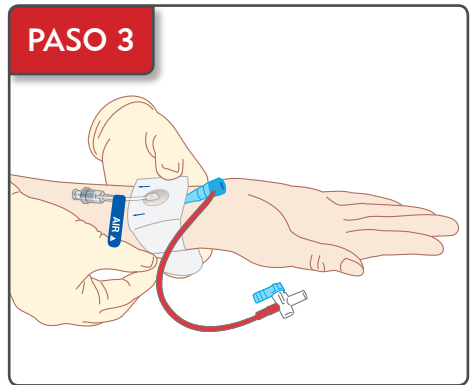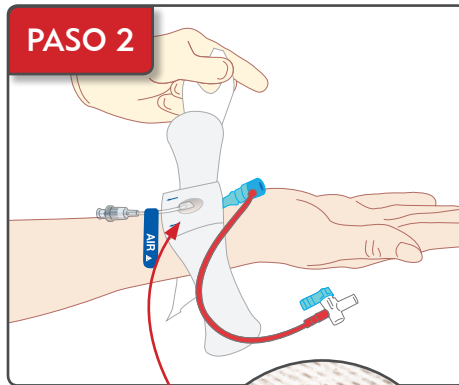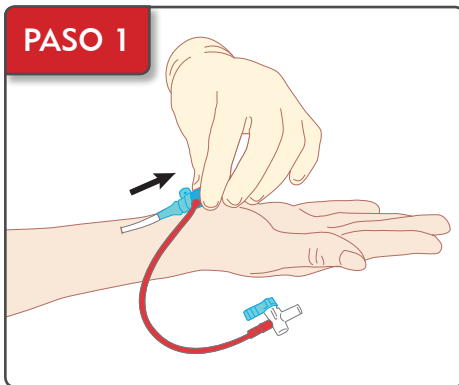

**VER AL DORSO LAS INSTRUCCIONES
PARA DESINFLAR Y RETIRAR
EL DISPOSITIVO**

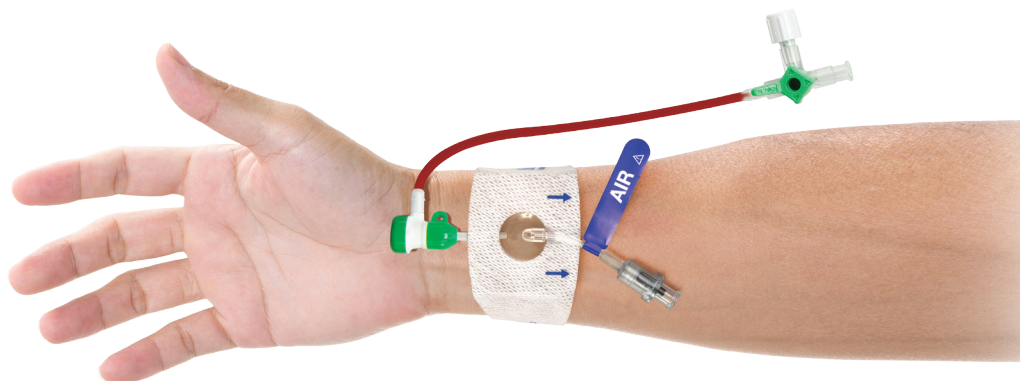



PASO 1. Directrices recomendadas para PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS.

- Mantener la compresión inicial durante un mínimo de 30-45 minutos.
- Acoplar y ajustar totalmente la jeringa con conexión Luer lock al tubo. Asegúrese de sujetar el émbolo con el pulgar.
- Extraer 1-2 mL de aire.
- Observar si hay sangrado. En caso afirmativo, añadir aire sin superar el volumen máximo de 7 ml.
- Repetir cada 15-30 minutos hasta que el balón este completamente desinflado y se haya logrado la hemostasia.
- Al desinflar el balón completamente, no extraer más de 7 ml (no crear una presión negativa).

Directrices recomendadas para PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS.

- Mantener la compresión inicial durante un mínimo de 60-90 minutos.
- Acoplar y ajustar totalmente la jeringa con conexión Luer lock al tubo. Asegúrese de sujetar el émbolo con el pulgar.
- Eliminar 1-2 mL de aire.
- Vigilar si hay sangrado. En caso afirmativo, añadir aire sin superar el volumen máximo de 7 mL.
- Repetir cada 15-30 minutos hasta que el balón este completamente desinflado y se haya logrado la hemostasia.
- Al desinflar el balón completamente, no extraer más de 7 mL (no crear una presión negativa).

PASO 2. Confirmar que se ha logrado la hemostasia. Retirar cuidadosamente el dispositivo y aplicar vendaje estéril según el protocolo del hospital.

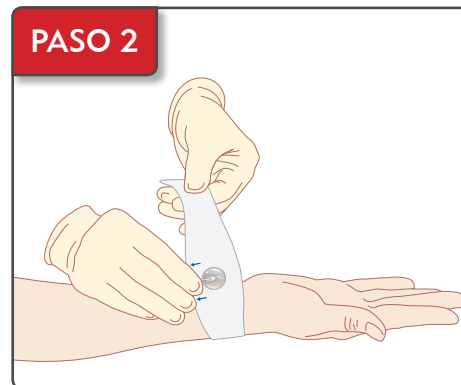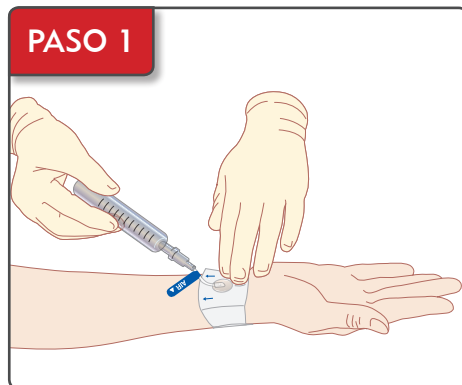

Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.208.4300
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

MeritEMEA.com

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Spain
+34 911238406

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 225180252
(Français)
+41 225948000
(Italiano)
+41 225180035
UK
0800 973 115