

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VEDERE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

PASSO 1. Assicurarsi che la zona sia pulita e asciutta. Aspirare e ritirare l'introduttore per 2-3 cm.

PASSO 2. Staccare il supporto adesivo di Safeguard Radial per circa la metà (su entrambi i lati) e applicare il centro del bulbo (palloncino) sul punto di iniezione. Le frecce devono essere rivolte verso l'alto, lungo il braccio del paziente.






PASSO 3. Togliere il supporto adesivo rimanente e fissarlo attorno al polso.

PASSO 4. Collegare bene la siringa Luer lock alla prolunga contrassegnata da "AIR" (ARIA). **Verificare che nel dispositivo si stia iniettando solo aria.** Gonfiare il bulbo con un massimo di 7 mL di aria. Togliere la siringa.


PASSO 5. Togliere l'introduttore. Verificare l'assenza di sanguinamento. **Verificare la pulsazione distale e**

prossimale. Assicurarsi di mantenere un'adeguata perfusione. Se necessario, regolare il volume dell'aria nel bulbo fino a che il polso distale e quello prossimale siano adeguati. Il volume dell'aria non deve superare 7 mL.

NOTA: Il volume dell'aria e il tempo di compressione necessari potrebbero differire a seconda delle condizioni del paziente, del dosaggio dell'anticoagulante e della dimensione del punto di iniezione.

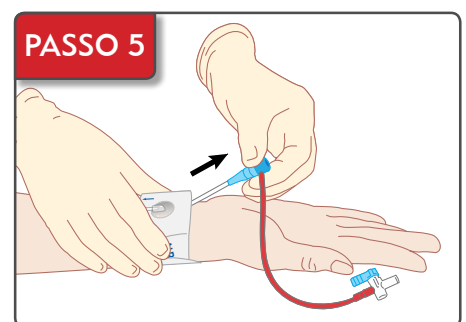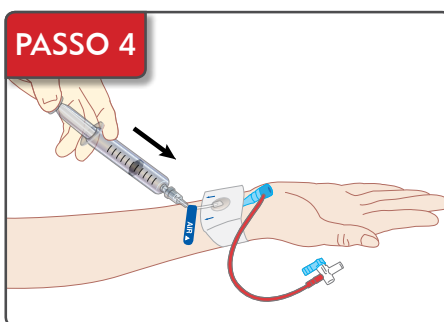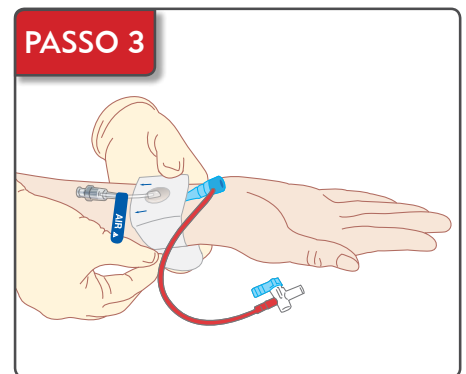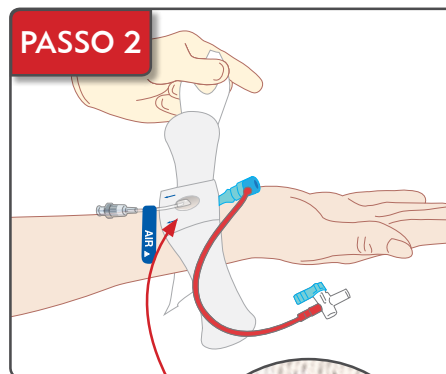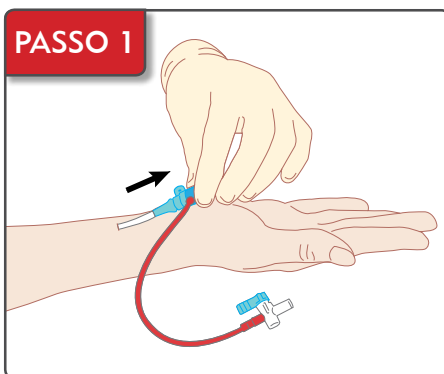

VEDI RETRO PER LE LINEE GUIDA SUGGERITE PER LO SGONFIAGGIO E LA RIMOZIONE

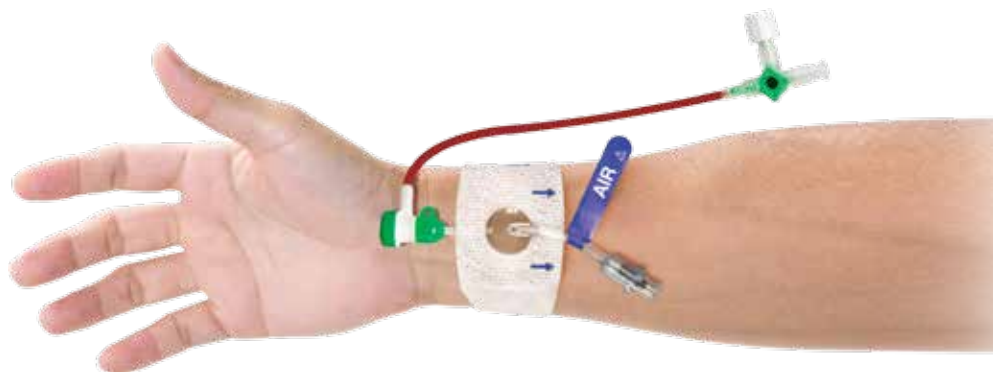



PASSO 1. Linee guida suggerite per la PROCEDURA DIAGNOSTICA.

- a. La compressione iniziale deve essere mantenuta per minimo 30-45 minuti.
- b. Collegare e innestare completamente la siringa Luer lock alla prolunga, mantenendo la pressione sullo stantuffo, per evitare lo sgonfiaggio immediato del bulbo.
- c. Eliminare 1-2 mL di aria.
- d. Monitorare l'eventuale sanguinamento, e, se necessita, aggiungere aria non superando un volume massimo di 7 mL.
- e. Ripetere ogni 15-30 minuti fino a che il bulbo è completamente sgonfio e si è ottenuta l'emostasi.
- f. Quando si sgonfia completamente il palloncino non estrarre più di 7 mL (non creare pressione negativa).

Linee guida suggerite per la PROCEDURA INTERVENTISTICA.

- a. La compressione iniziale deve essere mantenuta per almeno 60-90 minuti.
- b. Collegare e innestare completamente la siringa Luer lock alla prolunga, mantenendo la pressione sullo stantuffo, per evitare lo sgonfiaggio immediato del bulbo.
- c. Eliminare 1-2 mL di aria.
- d. Monitorare l'eventuale sanguinamento, e, se necessita, aggiungere aria non superando un volume massimo di 7 mL.
- e. Ripetere ogni 15-30 minuti fino a che il bulbo è completamente sgonfio e si è ottenuta l'emostasi.
- f. Quando si sgonfia completamente il palloncino non estrarre più di 7 mL (non creare pressione negativa).

PASSO 2. Verificata la completa emostasi, rimuovere il dispositivo con precauzione e applicare una medicazione sterile secondo il protocollo ospedaliero.

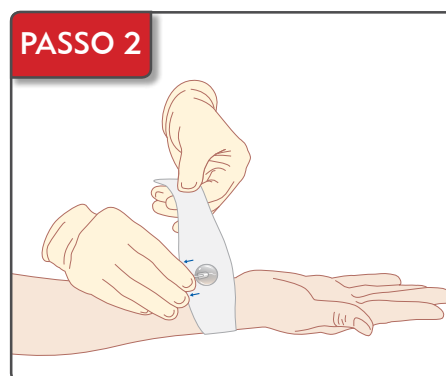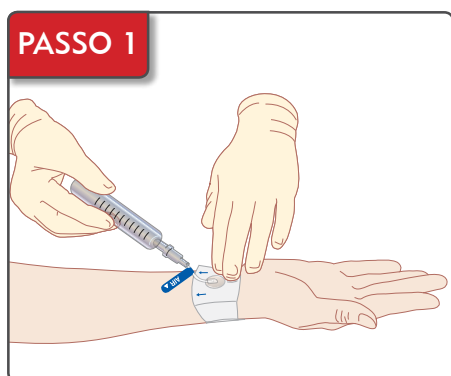

Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.208.4300
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

MeritEMEA.com

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Spain
+34 911238406

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 225180252
(Français)
+41 225948000
(Italiano)
+41 225180035
UK
0800 973 115