

EK BILGI İÇİN LÜTFEN KULLANMA TALIMATLARINA BAŐVURUNUZ.

1. ADIM. Uygulama yerinin temiz ve kuru olduğundan emin olun. Sheath'i aspire edin ve 2-3 cm kadar dışarı doğru çekin.

2. ADIM. Safeguard Radial'in arka tarafındaki yapışkan bandı (her iki yandan da) takriben yarısına kadar çıkarın ve balonun merkezini arteriyotomili bölge üzerine yerleştirin. Oklar hastanın kolunu işaret edecek şekilde yukarıya bakıyor olmalı.







3. ADIM. Geri kalan yapışkan bandı da çıkarıp bileğin etrafına sararak yapıştırın.

4. ADIM. "AIR" yazılı tüpe güvenli bir şekilde Luer lock şırıngayı bağlayın. **Cihaza sadece hava enjekte ettiğinizden emin olun.** Ampule en fazla 7 mL hava basın. Enjektörü çıkarın.


5. ADIM. Sheath'i çıkarın. Kanama olmadığını teyit edin. **Distal ve proksimal nabzı teyit edin. Yeterli perfüzyonun**

sağlandığından emin olun. Gerekli olduğunda, distal ve proksimal uçlarda nabız yeterli oluncaya kadar hazne içindeki hava akımını ayarlayın. Hava miktarı 7 mL'yi geçmemelidir.

NOT: Gerekli hava hacmi ve kompresyon süresi hastanın durumu, antikoagülan dozu ve girişim(kesi) alanına göre değişebilir. **SÖNDÜRME VE ÇIKARTMA**

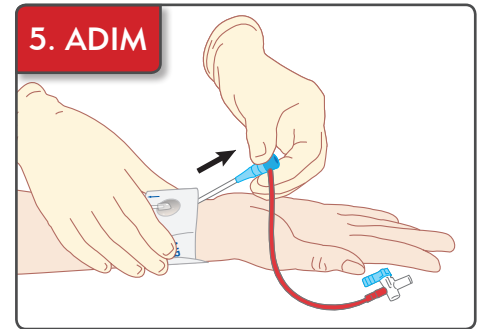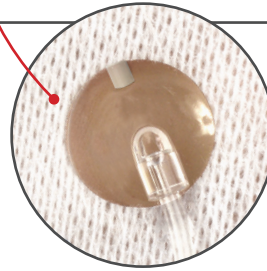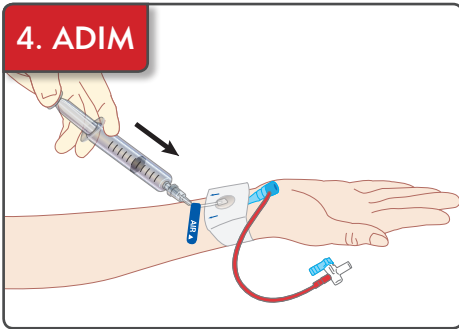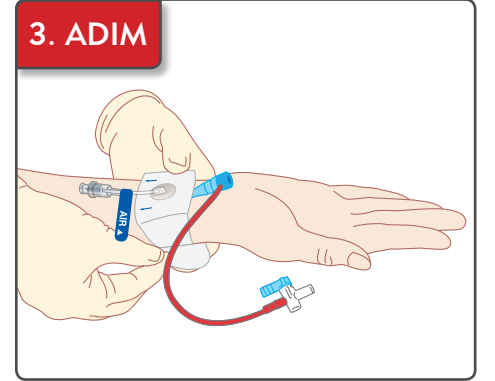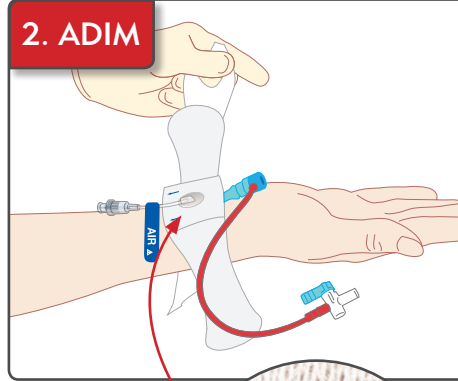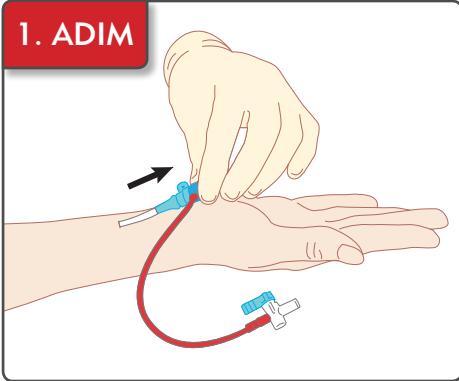

**SÖNDÜRME VE ÇIKARTMA İÇİN
ARKA SAYFADAKİ ÖNERİLEN
KILAVUZ BİLGİLERE BAKIN**

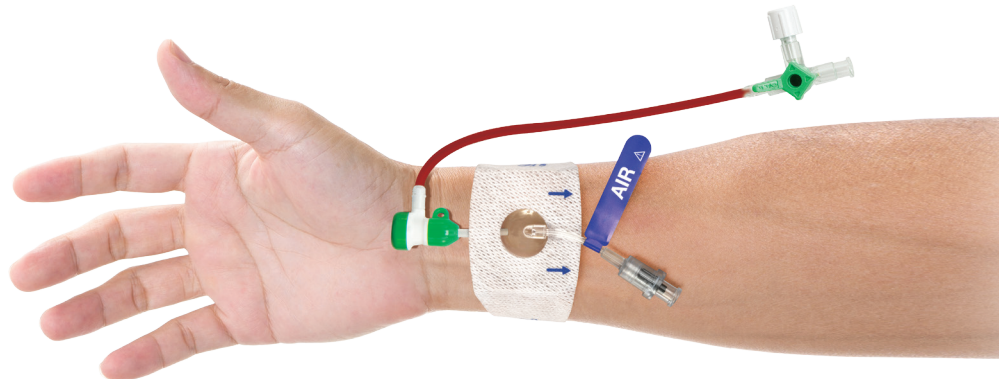



1. ADIM. Tanı Süreci için ÖNERİLEN TALİMATLAR.

- Başlangıçtaki kompresyon süresi en az 30-45 dakika olmalıdır.
- Luer lock şırıngayı tubing'e tam sokarak yerleştirin. Pompayı başparmakla tuttuğunuzdan emin olun.
- 1-2 mL hava çekin.
- Kanama var mı bakın. Eğer kanama olursa, maksimum 7 mL hacmi geçmeyecek şekilde hava basın.
- Her 15-30 dakikada bir balon tamamen sönene ve hemostaz sağlanana kadar tekrarlayın.
- Balonu tamamen söndürürken, 7 mL'den daha fazla çekmeyin (negatif basınç oluşturmayın)

Girişimsel süreç için ÖNERİLEN TALİMATLAR.

- Başlangıçtaki kompresyon süresi minimum 60-90 dakika olmalıdır.
- Luer lock şırıngayı tubing'e tam sokarak yerleştirin. Pompayı başparmakla tuttuğunuzdan emin olun.
- 1-2 mL hava çekin.
- Kanama var mı bakın. Eğer kanama varsa, maksimum 7 mL hacmi geçmeyecek şekilde hava basın.
- Her 15-30 dakikada bir balon tamamen sönene ve hemostaz sağlanana kadar tekrarlayın.
- Balonu tamamen söndürürken, 7 mL'den daha fazla çekmeyin (negatif basınç oluşturmayın)

2. ADIM. Hemostazın sağlandığından emin olun. Cihazı dikkatlice çıkarın ve hastane protokolünüze göre steril şekilde sarın.

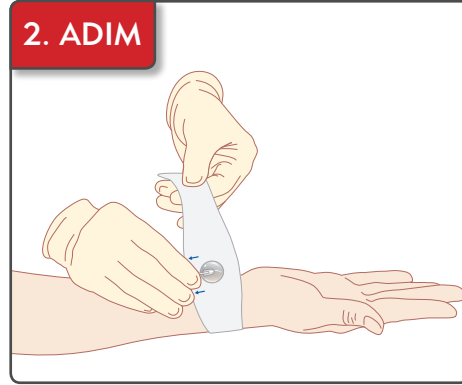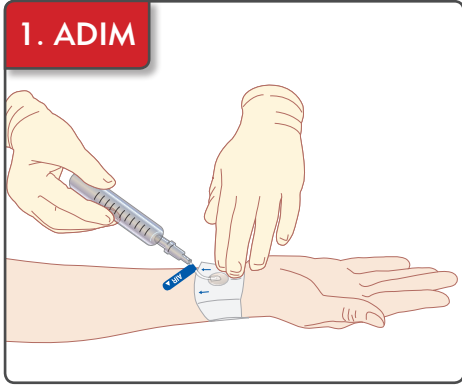

Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.208.4300
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

MeritEMEA.com

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Spain
+34 911238406

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 225180252
(Français)
+41 225948000
(Italiano)
+41 225180035
UK
0800 973 115